



Moyens auxiliaires pour le traitement du diabète

Notre assortiment

De la mesure de la glycémie à l'injection d'insuline, WEBSTAR propose les appareils et les consommables adaptés pour la gestion du diabète.



**Lancettes
de sécurité**



**Lecteur de glycémie
et bandelettes-tests**




Aiguilles pour stylo




**Seringues à insu-
line**



Gants

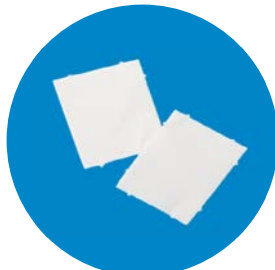

Désinfection

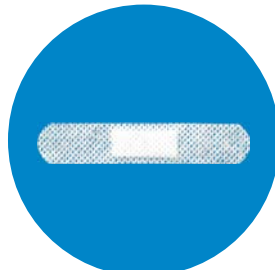

Pansements



**Collecteurs de
déchets**

Nos marques



Voici comment trouver le bon produit

Les produits de notre assortiment pour le traitement du diabète sont conçus par des fabricants renommés et forts d'une longue expérience. Pour vous aider dans votre choix, nous avons rassemblé pour vous les principales caractéristiques des produits.

Longueur de l'aiguille

Il est désormais recommandé d'utiliser des aiguilles courtes de 4 mm pour les stylos, même pour les personnes en surpoids ou souffrant d'obésité. Les aiguilles courtes permettent d'éviter toute injection d'insuline dans le muscle. La formation d'un pli cutané n'est généralement pas nécessaire avec des aiguilles pour stylo de 4 mm. Sur recommandation d'un médecin, une aiguille plus longue peut être utilisée. Les patients et patientes utilisant déjà des aiguilles plus longues peuvent conserver cette méthode éprouvée. Les seringues à insuline sont généralement munies d'une aiguille de 6, 7 ou 12,7 mm de long. Ici aussi, il est recommandé d'utiliser des aiguilles courtes (6 mm) afin de minimiser le risque d'administration intramusculaire.

Gauge

Cette valeur décrit le diamètre de l'aiguille. Plus la valeur de la gauge est élevée, plus l'aiguille est fine et plus la ponction est confortable. Plus la gauge est basse, plus l'aiguille est épaisse. Des aiguilles fines sont généralement utilisées pour administrer l'insuline: les stylos et les seringues à insuline sont compris entre 29 G (env. 0,33 mm) et 32 G (env. 0,23 mm). Pour mesurer la glycémie dans les établissements de soins de longue durée, des lancettes de sécurité de 28 G, 30 G et 31 G conviennent. Une gauge plus petite est utile en cas de durcissement de la peau ou de diminution de la circulation sanguine périphérique, afin de pouvoir prélever la quantité de sang nécessaire dès la première tentative.

Volume d'injection

Pour les seringues à insuline, la règle est la suivante: plus le volume d'injection est faible, plus la graduation est fine et plus l'insuline peut être dosée avec précision. Choisissez toujours la plus petite seringue possible.

0,3 ml à 30 unités d'insuline

0,5 ml à 50 unités d'insuline

1 ml à 100 unités d'insuline

Sécurité

Choisissez des aiguilles pour stylos et des seringues à insuline munies de dispositifs de sécurité qui recouvrent l'aiguille après usage et vous protègent contre les piqûres d'aiguille.



Lancettes de sécurité

Avec les lancettes de sécurité à usage unique, vous prélevez rapidement, en toute sécurité et sans douleur une goutte de sang capillaire dans la pulpe du doigt pour mesurer ensuite la glycémie.

 **OWEN MUMFORD**
united with embecta



Unistik® 3

Avec le mécanisme de déclenchement latéral, l'utilisateur détermine le moment du déclenchement

 **OWEN MUMFORD**
united with embecta



Unistik® Touch


Activation par simple pose sur la peau («activation one-touch»), sans bouton supplémentaire

Avantages de la série Unistik®

- **Sans douleur:** huit points de pression sur la tête de la lancette stimulent les nerfs, ce qui réduit la sensation de douleur.
- **Sûre:** après la piqûre, l'aiguille se rétracte dans le boîtier.
- **Simple:** prête à l'emploi.

Lecteur de glycémie

Le lecteur de glycémie Alphacheck CareSens™ DUAL est un appareil fiable et facile à utiliser pour mesurer le taux de glycémie. Il peut être utilisé pour effectuer des auto-mesures, ou par le personnel médical spécialisé.

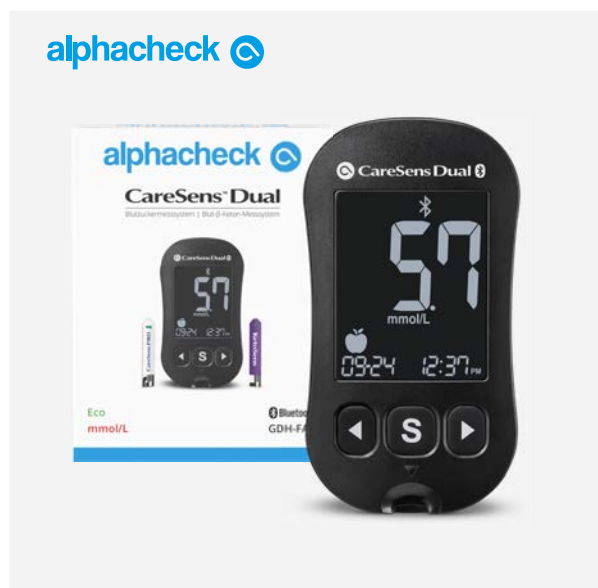

Alphacheck CareSens™ DUAL

- Unité de mesure: mmol/l
- Plage de mesure: 20-600 mg/dl
- Valeurs moyennes déterminables à sur 1, 7, 14, 30 et 90 jours
- Indicateur d'hypoglycémie / d'hyperglycémie
- Transmission de données par Bluetooth
- Marquage des repas
- Fonction alarme incluse

Accessoires



Auto-piqueur



Bandelettes-test



Solution de contrôle

La solution de contrôle se conserve 3 mois après la date d'ouverture. N'utilisez plus la solution si la date de péremption est dépassée.

Aiguilles pour stylo

Nos aiguilles pour stylos permettent une injection d'insuline douce et confortable. Elles sont compatibles avec les stylos à insuline courants. Les produits dotés d'un dispositif de protection préviennent les risques de piqûres accidentelles.



Ultra-Fine™

Aiguille à paroi fine pour un bon écoulement de l'insuline, biseau fin pour une injection indolore



Ultra-Fine™ PRO

Perfectionnement de l'Ultra-Fine™ avec paroi ultramince et base rainurée pour une profondeur de pénétration constante



AutoShield Duo™

Double dispositif de sécurité qui recouvre l'aiguille après utilisation, côté utilisateur et côté patient



Unifine®

Aiguille à biseau triple et revêtement en silicone pour une injection confortable, traitement anti-coring pour une perforation nette de l'ampoule médicamenteuse



Unifine® Plus®

Avec désadaptateur pour visser facilement l'aiguille sur le stylo et stocker l'aiguille usagée en toute sécurité après l'injection

Seringues à insuline

Dans notre assortiment dédié au traitement du diabète, vous trouverez des seringues graduées en unités d'insuline (U-100) optimisées pour l'injection d'insuline. Les produits sont munis d'une aiguille particulièrement fine pour une injection sous-cutanée la moins douloureuse possible.



BD Micro-Fine™

Échelle	30, 50 et 100 unités
Gauge	29, 30 et 31 G
Longueur de l'aiguille	6, 8 et 12,7 mm



SOL-CARE™

Échelle	50 et 100 unités
Gauge	29 G
Longueur de l'aiguille	12,5 mm



BD SafetyGlide™

Avec protection intégrée contre les piqûres accidentelles: un dispositif de sécurité coulissant vient recouvrir l'aiguille après l'injection

Échelle	30 et 50 unités
Gauge	29 et 31 G
Longueur de l'aiguille	7 et 8 mm

Accessoires



**Gants d'examen
Abena Classic**

Nitrile, bleu, non poudré, taille S–XL



Tampons alcoolisés Clean Comfort

imprégnés d'alcool isopropylique à 70%,
65 × 30 mm



**Pansement pour injection
Meditrade**

2 × 4 cm, avec compresse pour plaies



Collecteur de déchets

2 litres, ø 214 mm