



Ausili per la terapia del diabete

La nostra gamma

Dalla misurazione della glicemia all'iniezione di insulina, WEBSTAR offre i dispositivi e i materiali di consumo adeguati per la gestione del diabete.




**Lancette
di sicurezza**



**Glucometro e
strisce reattive**




Aghi per penna

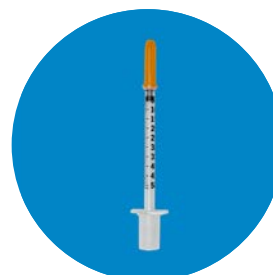


**Siringhe per
insulina**



Guanti

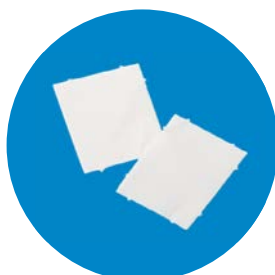

**Materiale disin-
fettante**

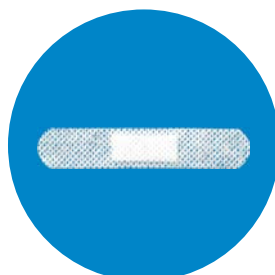

Cerotti



**Contenitori per
lo smaltimento**

I nostri marchi



Come trovare il prodotto giusto

Gli articoli della nostra gamma per il diabete sono realizzati da rinomati produttori con esperienza pluriennale. Per agevolare la scelta abbiamo riassunto le principali caratteristiche dei prodotti.

Lunghezza dell'ago

Oggi per le penne si consigliano aghi corti da 4 mm, anche per le persone in sovrappeso e obese. Gli aghi corti impediscono che l'insulina venga iniettata nel muscolo. Nella maggior parte dei casi, con gli aghi per penna da 4 mm non è necessario formare una plica cutanea. Su raccomandazione medica è possibile utilizzare un ago più lungo. I pazienti abituati ad aghi più lunghi possono continuare a utilizzarli. Le siringhe per insulina hanno solitamente un ago lungo 6, 7 o 12,7 mm. Anche in questo caso si raccomandano aghi corti (6 mm) per ridurre al minimo il rischio di somministrazione intramuscolare.

Gauge

Questo valore indica il diametro dell'ago. Più è alto, più l'ago è sottile e meno fastidiosa è la puntura. Più è basso, maggiore è il diametro dell'ago. Per la somministrazione di insulina si usano generalmente aghi sottili: le penne e le siringhe per insulina sono comprese tra 29G (circa 0,33 mm) e 32G (circa 0,23 mm). Per la misurazione della glicemia, nelle strutture di lungodegenza sono indicate lancette di sicurezza da 28G, 30G e 31G. In caso di pelle indurita o ridotta circolazione periferica è opportuno utilizzare un ago con un gauge basso in modo da poter prelevare la quantità di sangue necessaria già al primo tentativo.

Volume delle siringhe

Per le siringhe di insulina occorre tenere presente che minore è il volume, più dettagliata è la scala graduata e più accurato è il dosaggio dell'insulina. Scegliere sempre la siringa più piccola possibile.

0,3 ml	fino a 30 unità di insulina
0,5 ml	fino a 50 unità di insulina
1 ml	fino a 100 unità di insulina

Sicurezza

Scegliere aghi per penne e siringhe per insulina dotati di meccanismi di sicurezza che coprono l'ago dopo l'uso e impediscono di pungersi.

Lancette di sicurezza

Le lancette di sicurezza monouso permettono di prelevare in modo rapido, sicuro e quasi indolore una goccia di sangue capillare dal polpastrello per la misurazione della glicemia.

 **OWEN MUMFORD**
united with embecta



Unistik® 3

Con meccanismo di rilascio laterale, l'utilizzatore stabilisce il momento del rilascio

 **OWEN MUMFORD**
united with embecta



Unistik® Touch


Si attiva semplicemente applicandolo sulla pelle («attivazione one-touch») senza pulsante aggiuntivo

I vantaggi della serie Unistik®

- **Quasi indolore:** otto punti di pressione sulla testa della lancetta stimolano i nervi, riducendo la sensazione di dolore.
- **Sicura:** dopo la puntura, l'ago viene ritratto nell'alloggiamento.
- **Semplice:** subito pronta all'uso.

Glucometro

Il glucometro Alphacheck CareSens™ DUAL è un dispositivo affidabile e facile da usare per misurare il tasso glicemico. È indicato per l'automisurazione o la misurazione da parte di personale medico specializzato.

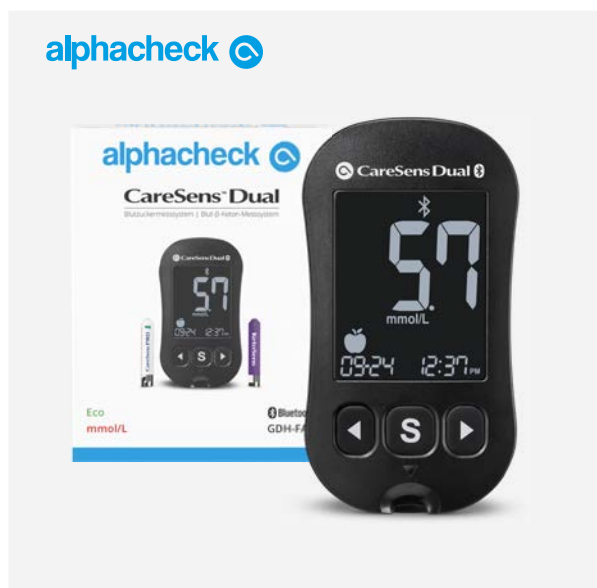

Alphacheck CareSens™ DUAL

- Unità di misura: mmol/l
- Intervallo di misurazione: 20-600 mg/dl
- Valori medi rilevabili a intervalli di 1, 7, 14, 30, 90 giorni
- Indicatore di ipoglicemia/iperglicemia
- Trasmissione dei dati tramite Bluetooth
- Marcatore dei pasti
- Con funzione di allarme

Accessori



Dispositivo
pungidito



Strisce reattive



Soluzione di controllo

La soluzione di controllo si conserva per 3 mesi dopo la prima apertura. Non utilizzare la soluzione dopo la data di scadenza.

Aghi per penna

I nostri aghi per penna consentono di iniettare agevolmente l'insulina. Sono compatibili con le comuni penne per insulina. I prodotti con meccanismo di protezione impediscono di pungersi con l'ago.



Ultra-Fine™

Parete dell'ago sottile per un buon flusso di insulina, affilatura di precisione per un'iniezione quasi indolore



Ultra-Fine™ PRO

Evoluzione di Ultra-Fine™ con parete ultrasottile e base dell'ago scanalata per una profondità di penetrazione costante



AutoShield Duo™

Il doppio meccanismo di sicurezza copre l'ago sul lato dell'utilizzatore e del paziente dopo l'uso



Unifine®

Tripla affilatura della punta dell'ago e rivestimento in silicone per un'iniezione meno fastidiosa, trattamento anti-coring per una perforazione pulita del tappo della fiala



Unifine® Plus®

Con una camera di rimozione per facilitare l'avvitamento dell'ago sulla penna e una camera per la conservazione sicura dell'ago usato

Siringhe per insulina

Nella nostra gamma dedicata al diabete sono disponibili siringhe ottimizzate per l'iniezione di insulina con scala graduata in unità di insulina (insulina U 100). I prodotti sono dotati di un ago particolarmente sottile per ridurre al minimo il dolore dell'iniezione sottocutanea.



BD Micro-Fine™

Scala	30, 50 e 100 unità
Gauge	29, 30 e 31G
Lunghezza dell'ago	6, 8 e 12,7 mm



SOL-CARE™

Scala	50 e 100 unità
Gauge	29G
Lunghezza dell'ago	12,5 mm



BD SafetyGlide™

Con protezione integrata da ferite da ago, un braccio di sicurezza scorrevole copre l'ago dopo l'iniezione

Scala	30 e 50 unità
Gauge	29 e 31G
Lunghezza dell'ago	7 e 8 mm

Accessori



Guanti per uso medico Abena Classic

In nitrile, blu, senza talco, misura S-XL



Compresse con alcol Clean Comfort

Imbevute di alcool isopropilico al 70%,
65 × 30 mm



Cerotti post-iniezione Meditrade

2 × 4 cm, con tampone assorbente



Contenitore per lo smaltimento

2 litri, ø 214 mm