



Hilfsmittel Diabetes- Therapie

Unser Sortiment

Von der Blutzuckermessung bis zur Insulininjektion bietet WEBSTAR die passenden Geräte und Verbrauchsmaterialien rund ums Diabetes-Management.



**Sicherheits-
lanzetten**



**Blutzuckermessgerät
und Teststreifen**




Pennadeln




Insulinspritzen



Handschuhe

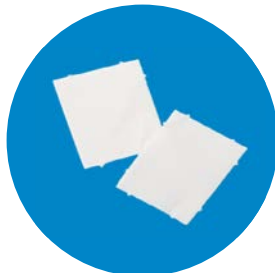

Desinfektion

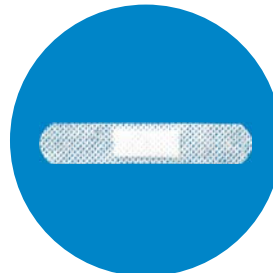

Pflaster



Entsorgungsboxen

Unsere Marken



So finden Sie das richtige Produkt

Die Produkte in unserem Diabetes-Sortiment sind von renommierten Herstellern mit langjähriger Erfahrung. Um Ihnen die Auswahl zu erleichtern, haben wir die wichtigsten Produkteigenschaften zusammengestellt.

Nadellänge

Für Pens werden heute kurze 4-mm-Nadeln empfohlen – auch bei übergewichtigen oder adipösen Menschen. Kurze Nadeln verhindern, dass Insulin in den Muskel injiziert wird. Das Bilden einer Hautfalte ist mit 4-mm-Pennadeln meist nicht nötig. Auf Empfehlung eines Arzt oder einer Ärztin kann eine längere Nadel zum Einsatz kommen. Patienten und Patientinnen, die bisher erfolgreich längere Nadeln verwendet haben, können bei der bewährten Technik bleiben. Insulinspritzen haben in der Regel eine 6, 7 oder 12,7 mm lange Nadel. Auch hier werden kurze Nadeln (6 mm) empfohlen, um das Risiko einer intramuskulären Verabreichung zu minimieren.

Gauge

Dieser Wert beschreibt den Nadeldurchmesser. Je höher der Gauge-Wert, desto dünner die Nadel und desto angenehmer die Punktion. Je niedriger der Gauge-Wert, desto dicker die Nadel. Zum Verabreichen von Insulin werden generell dünne Nadeln verwendet: Pens und Insulinspritzen sind zwischen 29G (ca. 0,33 mm) bis 32G (ca. 0,23 mm). Für die Blutzuckermessung in Langzeitpflegeinstitutionen eignen sich Sicherheitslanzetten mit 28G, 30G und 31G. Ein tiefer Gauge ist bei verhärteter Haut oder verminderter peripheren Durchblutung sinnvoll, damit gleich beim ersten Versuch die nötige Menge Blut entnommen werden kann.

Spritzvolumen

Bei Insulinspritzen gilt: Je kleiner das Spritzvolumen, desto feiner ist die Skalenunterteilung und desto genauer lässt sich das Insulin dosieren. Wählen Sie immer die kleinstmögliche Spritze.

0,3 ml	bis 30 Insulineinheiten
0,5 ml	bis 50 Insulineinheiten
1 ml	bis 100 Insulineinheiten

Sicherheit

Wählen Sie Pennadeln und Insulinspritzen mit Sicherheitsmechanismen, welche die Nadel nach dem Gebrauch abdecken und Sie vor Nadelstichverletzungen schützen.

Sicherheitslanzetten

Mit den Einweg-Sicherheitslanzetten gewinnen Sie schnell, sicher und schmerzarm einen Tropfen Kapillarblut aus der Fingerbeere für die anschließende Blutzuckermessung.

 **OWEN MUMFORD**
united with embecta



Unistik® 3

Mit seitlich angebrachtem Auslösemechanismus, Anwender bestimmt Auslösezeitpunkt

 **OWEN MUMFORD**
united with embecta



Unistik® Touch


Aktivierung durch einfaches Aufsetzen auf die Haut («One-Touch-Aktivierung»), ohne zusätzlichen Knopf

Vorteile Unistik®-Reihe

- **Schmerzarm:** Acht Druckpunkte am Lanzettenkopf stimulieren die Nerven, was das Schmerzempfinden reduziert.
- **Sicher:** Nach dem Stich wird die Nadel ins Gehäuse zurückgezogen.
- **Einfach:** Sofort einsatzfähig

Blutzuckermessgerät

Das Blutzuckermessgerät Alphacheck CareSens™ DUAL ist ein zuverlässiges und benutzerfreundliches Gerät zur Messung des Blutzuckerspiegels. Es eignet sich für die Selbstmessung oder die Messung durch medizinisches Fachpersonal.

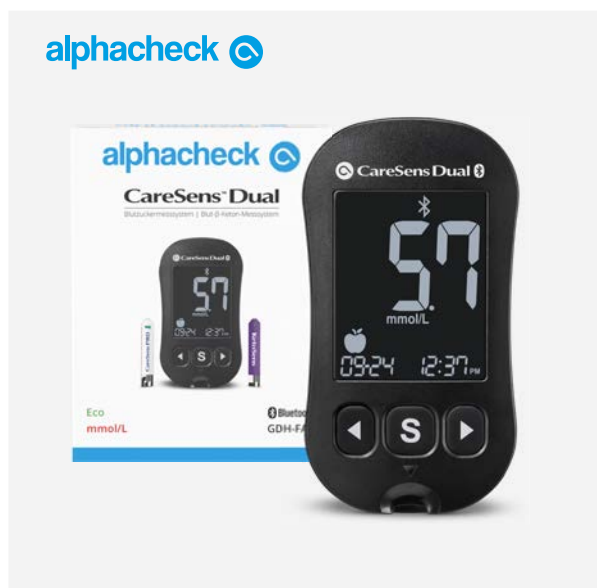

Alphacheck CareSens™ DUAL

- Messeinheit: mmol/l
- Messbereich: 20-600 mg/dl
- Durchschnittswerte im 1-, 7-, 14-, 30-, 90-Tagesrhythmus ermittelbar
- Indikator für Hypoglykämie / Hyperglykämie
- Bluetooth-Datenübertragung
- Mahlzeiten-Markierung
- inkl. Alarm-Funktion

Zubehör



Stechhilfe



Teststreifen



Kontrolllösung

Die Kontrolllösung ist 3 Monate nach Anbruchsdatum haltbar. Verwenden Sie die Lösung nicht mehr, wenn das Verfallsdatum überschritten ist.



Pennadeln

Unsere Pennadeln ermöglichen eine angenehme Insulininjektion. Sie sind mit den gängigen Insulinpens kompatibel. Produkte mit Schutzmechanismus verhindern Nadelstichverletzungen.



Ultra-Fine™

Dünne Nadelwand für guten Insulinfluss, feiner Nadelschliff für schmerzarme Injektion



Ultra-Fine™ PRO

Weiterentwicklung der Ultra-Fine™ mit ultradünner Nadelwand und gerillter Nadelbasis für gleichbleibende Einstichtiefe



AutoShield Duo™

Doppelter Sicherheitsmechanismus deckt Nadel nach Gebrauch auf der Anwender- und Patientenseite ab



Unifine®

Dreifach geschliffene Nadelspitze und Silikonbeschichtung für angenehmes Injizieren, Anti-Coring-Behandlung für sauberes Anstechen der Medikamentenampulle



Unifine® Plus®

Mit einer Entnahmekammer für bequemes Anschrauben der Nadel am Pen und einer Kammer für das sichere Aufbewahren der gebrauchten Nadel

Insulinspritzen

In unserem Diabetes-Sortiment finden Sie für die Insulininjektion optimierte Spritzen mit Skala in Insulineinheiten (U-100-Insulin). Die Produkte verfügen über eine besonders feine Nadel für eine möglichst schmerzarme subkutane Injektion.



BD Micro-Fine™

Skala	30, 50 und 100 Units
Gauge	29, 30 und 31G
Nadellänge	6, 8 und 12,7 mm



SOL-CARE™

Skala	50 und 100 Units
Gauge	29G
Nadellänge	12,5 mm



BD SafetyGlide™

Mit integriertem Schutz vor Nadelstichverletzung, ein verschiebbarer Sicherheitsarm deckt die Nadel nach der Injektion ab

Skala	30 und 50 Units
Gauge	29 und 31G
Nadellänge	7 und 8 mm

Zubehör



**Untersuchungshandschuhe
Abena Classic**
Nitril, blau, puderfrei, Gr. S-XL



Alkoholtupfer Clean Comfort
mit 70 % Isopropyl-Alkohol getränkt,
65 × 30 mm



Injektionspflaster Meditrade
2 × 4 cm, mit Wundkissen



Entsorgungsbehälter
2 Liter, ø 214 mm